

فرز

يمكنك فرز خصائص المستند بناءً على أي حقل تريده. للفرز، انقر فوق اسم الحقل المطلوب. مثلث صغير على الجانب الأيمن من اسم الحقل يشير إلى ترتيب الفرز (تصاعدي/تنازلي).


### • حذف خصائص الوثيقة

يمكنك أيضًا اختيار حذف خصائص المستند التي أصبحت قديمة أو لم تعد مطلوبة. لحذف خاصية الوثيقة:

1. حدد خاصية الوثيقة المراد حذفها

2. انقر فوق حذف

تم حذف خاصية الوثيقة المحددة.

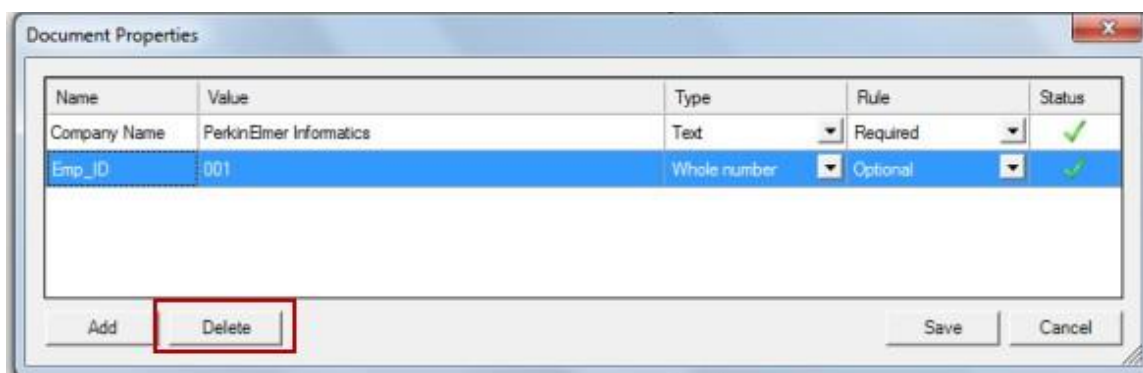

### • الحفظ التلقائي والاسترداد التلقائي

يمكنك تكوين ChemDraw لحفظ مستند مفتوح بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك، يقوم مربع

الاختيار "تمكين الاسترداد التلقائي" الافتراضي بحفظ ملف مؤقت في حالة تعطل البرنامج.

ملاحظة: سيُسمح لك بالحفظ التلقائي/الاسترداد التلقائي للمستندات التي لم يتم تعيين القيم

المطلوبة لخصائص المستند بها. ومع ذلك، لن تتمكن من حفظ المستند المسترد تلقائيًا إذا كانت

هناك خاصية مستند غير محددة. يمكنك ضبط قيمة خاصية الوثيقة المطلوبة في مربع الحوار

"خصائص الوثيقة" ثم "حفظ".

يمكنك تحديد مكان تخزين النسخ المحفوظة أو الاسترداد التلقائي

1. انتقل إلى الملف > التفضيلات. يظهر مربع حوار التفضيلات

2. انقر فوق علامة التبويب فتح/حفظ

ملاحظة: في حالة استخدام نظام Macintosh، انتقل إلى ChemDrawProfessional/ChemDraw

Prime < التفضيلات

3. حدد خانة الاختيار حفظ الملفات كل مرة وأدخل إطارًا زمنيًا (بالدقائق).

يبدأ الوقت بعد إجراء التغيير الأول على المستند.

الحفظ التلقائي أو الاسترداد التلقائي إلى وجهة محددة

يمكنك تحديد مسار الحفظ التلقائي أو الاسترداد التلقائي لملفاتك. في الويندوز:

1. انتقل إلى الملف > التفضيلات. يظهر مربع حوار التفضيلات

2. انقر فوق علامة التبويب الدلائل

3. حدد خانة الاختيار استخدام موقع المستندات لحفظ الملفات في الموقع الافتراضي، أو انقر

فوق الزر "استعراض" بجوار حقل "موقع مسار الحفظ التلقائي/الاسترداد التلقائي" وحدد موقعًا

لملفاتك المحفوظة والمستردة.

## • معاينة ملفات CDX و CDXML

يمكنك الوصول إلى معاينة مصغرة "نظرة سريعة" لملفات CDX و CDXML الخاصة بك.

ملاحظة: عند تثبيت ChemDraw، يجب على مستخدمي Macintosh التأكد من النقر فوق

ملف CDQuick-Look.qgenerator وسحبه إلى مجلد QuickLook.

في نظام التشغيل Windows، انقر فوق ملف CDX أو CDXML داخل Windows

Explorer وستظهر صورة مصغرة. في بيئة ماكنتوش:

1. انقر على الباحث

2. حدد عرض <إظهار المعاينة

3. حدد موقع ملف CDX أو CDXML وانقر عليه وستظهر صورة مصغرة